


## ■ ROTOLI PER AUTOCLAVE

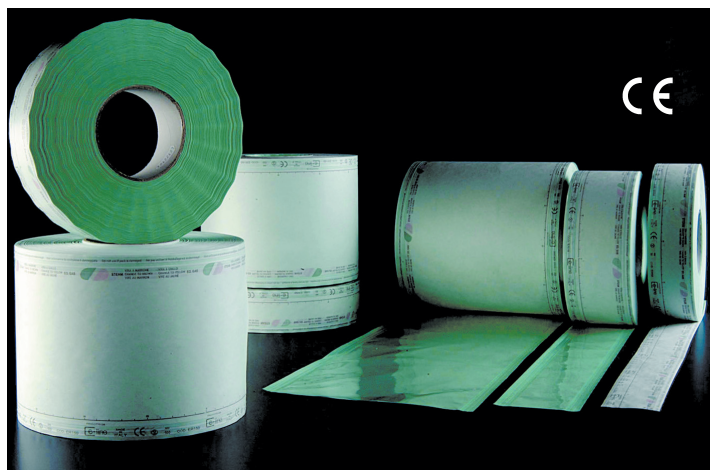

DISPONIBILI ALTRI FORMATI

**ROTLI PIATTI** per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO  
Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medica per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati.  
Ogni rotolo è lungo 200 metri.

| Codice GIMA | ROTLI PIATTI PER AUTOCLAVE O ETO | Minimo vendita |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 35810       | Rotoli piatti 200 metri x 50 mm  | 8 rotoli       |
| 35811       | Rotoli piatti 200 metri x 75 mm  | 8 rotoli       |
| 35812       | Rotoli piatti 200 metri x 100 mm | 4 rotoli       |
| 35813       | Rotoli piatti 200 metri x 150 mm | 4 rotoli       |
| 35814       | Rotoli piatti 200 metri x 200 mm | 2 rotoli       |
| 35817       | Rotoli piatti 200 metri x 250 mm | 2 rotoli       |
| 35815       | Rotoli piatti 200 metri x 300 mm | 2 rotoli       |
| 35816       | Rotoli piatti 200 metri x 400 mm | 1 rotoli       |

| Codice GIMA | ROTLI A SOFFIETTO PER AUTOCLAVE O ETO       | Minimo vendita |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|
| 35871       | Rotoli a soffietto 100 m x 100 mm x 25 mm   | 4 rotoli       |
| 35872       | Rotoli a soffietto 100 m x 150 mm x 25 mm   | 4 rotoli       |
| 35873       | Rotoli a soffietto 100 m x 200 mm x 30 mm   | 2 rotoli       |
| 35874       | Rotoli a soffietto 100 m x 250 mm x 32,5 mm | 2 rotoli       |
| 35875       | Rotoli a soffietto 100 m x 300 mm x 40 mm   | 1 rotolo       |
| 35876       | Rotoli a soffietto 100 m x 400 mm x 40 mm   | 1 rotolo       |

**ROTLI A SOFFIETTO** per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO. Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medica bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi. Ogni rotolo è lungo 100 metri.

## ■ BUSTE PIATTE ED AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE



**BUSTE PIATTE AUTOSALDANTI**  
per sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparente di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medica che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione.

Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione.

1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura.

2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204.

La carta medica è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 (Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256 (Inglese).

3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura.

4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene copolimero) e carta bianca medica Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica.

5. La saldatura "Multiline" è resistente e duratura; le linee di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta in modo da assicurare la massima tenuta.

Tutti i rotoli e le buste sono certificati e sono costruiti secondo gli standard internazionali DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485

DISPONIBILI ALTRI FORMATI  
minimo 10'000 buste

| Codice GIMA | BUSTE PIATTE PER AUTOCLAVE O ETO<br>NON AUTOSALDANTI | Minimo vendita |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 35880       | Buste piatte 100 x 300 mm                            | 1'000 pz.      |
| 35881       | Buste piatte 150 x 200 mm                            | 1'000 pz.      |
| 35882       | Buste piatte 150 x 250 mm                            | 1'000 pz.      |
| 35883       | Buste piatte 150 x 300 mm                            | 1'000 pz.      |
| 35884       | Buste piatte 150 x 400 mm                            | 1'000 pz.      |
| 35885       | Buste piatte 200 x 300 mm                            | 1'000 pz.      |
| 35886       | Buste piatte 200 x 350 mm                            | 500 pz.        |
| 35887       | Buste piatte 200 x 400 mm                            | 500 pz.        |
| 35888       | Buste piatte 250 x 400 mm                            | 500 pz.        |
| 35889       | Buste piatte 250 x 500 mm                            | 500 pz.        |
| 35890       | Buste piatte 300 x 400 mm                            | 500 pz.        |
| 35891       | Buste piatte 400 x 600 mm                            | 500 pz.        |
| 35895       | Buste formato speciale                               | 10'000 pz.     |

| Codice GIMA | BUSTE AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE O ETO | Minimo vendita |
|-------------|----------------------------------------|----------------|
| 35860       | Buste autosigillanti 90 x 165 mm       | 1'800 pz.      |
| 35861       | Buste autosigillanti 90 x 230 mm       | 1'800 pz.      |
| 35862       | Buste autosigillanti 140 x 250 mm      | 1'200 pz.      |
| 35863       | Buste autosigillanti 190 x 330 mm      | 1'200 pz.      |
| 35864       | Buste autosigillanti 190 x 400 mm      | 1'200 pz.      |
| 35866       | Buste autosigillanti 300 x 450 mm      | 400 pz.        |